


Montage- und Gebrauchsanleitung für:

Rückenstützen

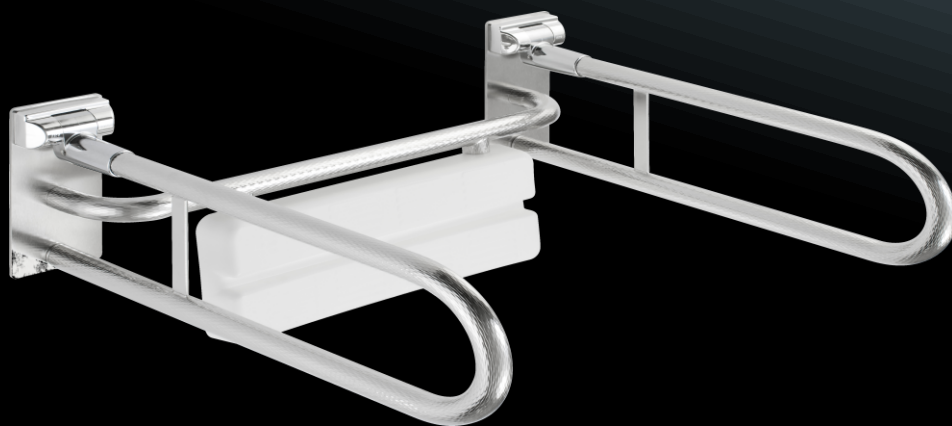

Sehr geehrte Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Rehagrip-Produkt entschieden haben.

Wir wünschen uns, dass unser Produkt Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit unterstützt.

Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungs- und Montageanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese auf, damit Sie bei Bedarf darin nachlesen können.

Sollten Sie diese Montage- und Gebrauchsanleitung nicht lesen können, haben Sie die Möglichkeit dieses Dokument als PDF-Datei unter www.rehagrip.at herunterzuladen oder bei unserer Service Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) anzufordern.

Die PDF-Datei kann auch in vergrößerter Form dargestellt werden.

Sämtliche Artikelnummern zu den jeweiligen Produkten, finden Sie in unserer Produkt-, Preisliste und auf unserer Homepage.

Alle Bemaßungen in dieser Montage- und Gebrauchsanleitung sind in Millimeter mm angegeben.

Inhaltsverzeichnis:

Verwendungszweck	3
Warnhinweise	3
Reinigungs- und Pflegehinweise	4
Wartung	4
Transportschäden	4
Montagebeispiel / Montagehinweis	5 - 10
Gesamtdimension	11 - 12
Masse der Rückenstützen	13

"Dieses Medizinprodukt erfüllt die Grundlegenden Anforderungen an Medizinprodukte gemäß der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG."

Verwendungszweck:

Unsere Rückenstützen sind vorwiegend für den Einsatz im WC- und/oder Sanitär-Bereich in Spitälern, Rehabilitationszentren, div. Heime und im privaten Bereich ausgelegt. Je nach Bedarfssituation können diese Stützen auch in anderen Bereichen verwendet werden. Sie erleichtern ein aufrechtes Sitzen, bieten Sicherheit im Rückenbereich und verhindern ein Wegkippen nach hinten. Um ein Seitliches Wegkippen zu verhindern, empfehlen wir die Rückenstützen in Kombination mit unseren Stützklappgriffen zu verwenden.

Warnhinweise:

Die Rehagrip Rückenstützen sind für eine maximale Belastung von bis zu 150 kg (für Personen mit max. 150 kg) ausgelegt.

Die max. Belastung ist auch auf dem Aufkleber an den Produkten ersichtlich.



Beim Überschreiten der Belastungswerte können dauerhafte Schäden am Produkt auftreten. In diesem Fall muss die Stütze unverzüglich von einem dafür qualifizierten Fachpersonal oder Wartungsunternehmen untersucht werden. Verwenden Sie die Rückenstütze nur wie in unserer Gebrauchsanweisung beschrieben.

Bei Zweckentfremdung, z. B.: als Steighilfe oder Turngerät kann es zu Unfällen mit Verletzungen kommen.




Bei Benutzung durch Kinder ist darauf zu achten, dass diese nicht mit den Kopf zwischen der Rückenstütze und der Wand geraten. Es besteht Strangulationsgefahr.



Achtung! Bei Montage in heißen Räumen (z.B. Sauna, Dampfbad) oder bei direkter Sonneneinstrahlung kann die metallene Oberfläche der Stütze mehr als 41°C erreichen. Es kann bei Berührung zu Verbrennungen kommen.

Im Freien oder in Räumen mit Umgebungstemperatur unter 0°C kann es zu Vereisungen der Oberflächen kommen. Ein sicherer Halt ist dann nicht mehr gegeben.

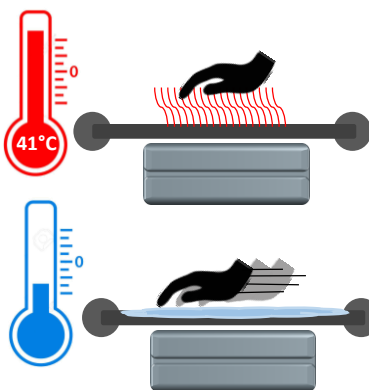

Um eine einwandfreie und sichere Benutzung der Rehagrip Rückenstützen gewährleisten zu können, darf die Montage ausschließlich vom qualifizierten Fachpersonal durchgeführt werden (z. B.: Sanitär-Installateure).

Bei nicht fachgerechter Montage, kann es bei Verwendung zu massiven Verletzungen kommen. Es wird dringend von einer Selbstmontage abgeraten!!

Bei der fachgerechten Durchführung der Montage ist unbedingt darauf zu achten, dass das Produkt bündig an der Befestigungsfläche der Wand montiert werden muss. Nicht auf z.B.: vorstehenden Fugen, Fliesenversatz oder sonstigen Unebenheiten. Weiters ist darauf zu achten, dass die Wand an der die Stütze befestigt wird keine Schwachstellen aufweist. Nach der Montage bzw. vor Benutzung der Rückenstütze muss eine Stabilitätsprüfung durchgeführt werden.

Bei Montage die Oberfläche vor Baustaub, Eisenstaub und Schmutz schützen. Stützen nicht unnötig ohne Verpackung herumliegen lassen. Bei Verletzung der metallenen Oberfläche durch Stahlwerkzeug (Hammer, Schraubendreher-Schlüssel usw.) kann es an der beschädigten Stelle zur Korrosion kommen.

Bei Einhaltung sämtlicher Hinweise wird eine 13 - jährige Lebensdauer der Rückenstützen garantiert.

Ausgenommen sind: Kunststoffteile (div. Abdeckungen) und Montagematerial. Diese Verschleißteile können Sie unter www.rehagrip.at oder bei unserer Service-Abteilung (Adresse und Telefonnummer siehe auf der Rückseite) als Ersatzteil erwerben.

Bei nicht einhalten der Warnhinweise bzw. unsachgemäßer Handhabung und/oder mangelhafter Montage, insbesondere unter Missachtung der aufgeführten Warn- und Sicherheitshinweise übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Reinigungs- und Pflegehinweise:

Zur Reinigung reicht in der Regel einfaches Abwischen mit einem feuchten Tuch. Größere Verunreinigungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern (keine säurehaltigen Reiniger und/oder mit Scheuermittelzusatz) entfernt werden. Bei Verwendung von Reinigungsmitteln, müssen die Anwendungshinweise sowie die Gebrauchsanleitung des Herstellers befolgt werden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsutensilien wie z. B.: Bürsten und Scheuerlappen.

Je nach Bedarf, kann auch Desinfektionsmittel mit bis zu 98% Alkoholanteil verwendet werden. Durch Nachpolieren mit einem trockenen Tuch können eventuell entstandene Wasserflecken entfernt werden.

Vor der Wiederverwendung muss der gereinigte Griff unbedingt trocken sein (Abrutscht Gefahr!) und es dürfen sich keine Reinigungsmittelrückstände auf der Oberfläche befinden.

Eine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, ist ausgeschlossen!

Wartung:

Sämtliche Rehagrip Rückenstützen sind Wartungsfrei!

Dennoch sollten die Befestigungen der Stützen zumindest einmal im Quartal ausschließlich vom dafür qualifizierten Fachpersonal überprüft und gegebenenfalls, Beanstandungen behoben werden. Um die Möglichkeit einer Verletzung zu vermeiden, führen Sie die Überprüfung auf keinen Fall selbst durch!

Bei unsachgemäßer bzw. nicht durchgeführter Kontrolle übernimmt die Firma Christian Stögerer e.U.-Rehagrip keine Haftung für Personen- oder Sachschäden!

Entsorgen Sie das Produkt und das Verpackungsmaterial nicht über den Hausmüll. Bringen Sie es zu den von örtlichen Behörden zugewiesenen Sammelstellen.



Transportschäden:

Das von uns produzierte Produkt hat unser Werk in einem einwandfreien Zustand verlassen.


Um eventuelle spätere schwerwiegende Funktionsbeeinträchtigungen und die daraus resultierenden Unfall- und Verletzungsgefahren zu vermeiden, muss bei Annahme das Produkt auf offensichtliche, leicht erkennbare Mängel geprüft werden. Eine Reklamation kann nur innerhalb von 3 Tagen ab Warenerhalt erfolgen. Bei versteckten Mängeln innerhalb von 3 Wochen. Die Ware darf nur trocken und druckfrei gelagert werden.

Hinweise des Aufklebers am Produkt:

Um welches Produkt handelt es sich.

Maximale Belastbarkeit des Produktes.

Datum der Herstellung.

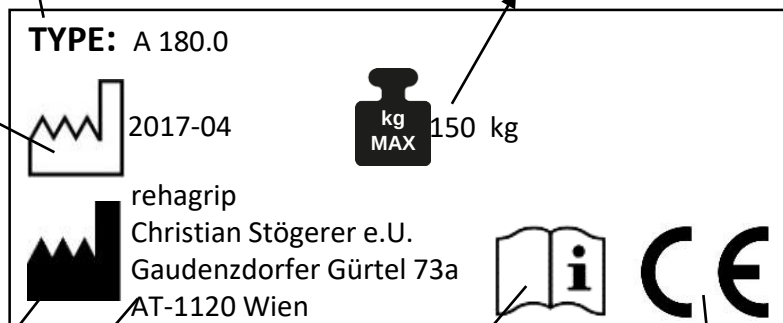

Wo wurde das Produkt produziert.


Montage- und Gebrauchsanweisung wird mit dem Produkt mitgeliefert und ist auf unserer Homepage abrufbar.

Produkt entspricht den geltenden Anforderungen, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften festgelegt sind.

Materialbeschreibung:

Unsere Produkte werden aus **Edelstahl- Werkstoff 1.4301** (Kurzbezeichnung: X5CrNi1810, Legierungsbestandteile: 18% Chrom, 10% Nickel) gefertigt.

Hierbei handelt es sich um einen austenitischen (rostfreien) Cr-Ni-Stahl der eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit gegen Nässe und Witterungseinflüsse, eine hohe Belastbarkeit und Formstabilität vorweist. Dieses Material ist leicht zu reinigen und Desinfektionsmittelbeständig.

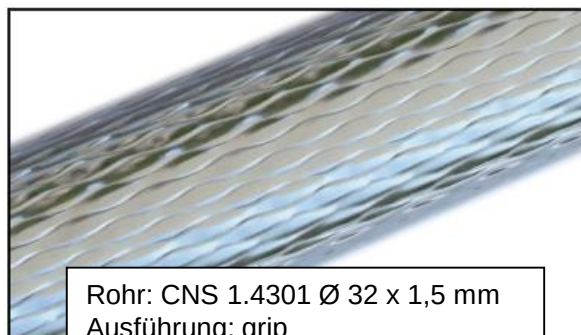

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: grip
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm
Oberfläche: elektropoliert



Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: glatt
Oberfläche: glatt poliert und elektropoliert


Div. Kunststoffteile wie z.B. Kugelstopfen und Abdeckkappen werden aus **PA6 – Polyamid 6** oder **PC-ABS Bayblend T45 PG** hergestellt.

Sie zeichnen sich durch eine hohe Festigkeit, Steifigkeit und Zähigkeit aus, besitzen eine gute Chemikalienbeständigkeit (keine Säuren) und verfügen bei tiefen Temperaturen bis -40°C über eine sehr gute Zähigkeit. Das Sitzmodul besteht aus **Isplen PB 140 G2M**.

Alle Rückenstützen sind auf Wunsch in div. Farben pulverbeschichtet erhältlich.

Die Pulverbeschichtung ist ein umweltfreundliches Beschichtungsverfahren, da es frei von Schwermetallen und Lösungsmittel ist.

Die Beschichtung zeichnet sich durch eine unübertroffene Farbbeständigkeit und Glanzerhaltung, sowie eine hohe chemische Beständigkeit aus. Durch die relativ hohen Schichtdicken wird eine sehr gute Festigkeit gegenüber mechanischen Belastungen erreicht.

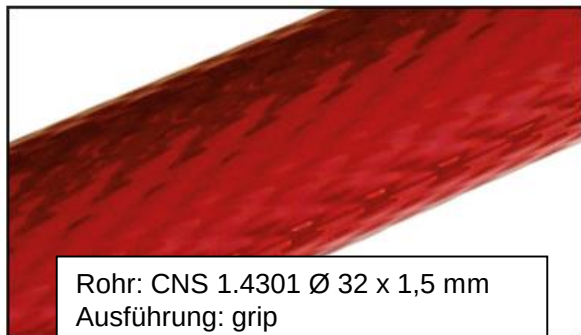

Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: grip
Profiltiefe: 0,15 mm – 0,20 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet



Rohr: CNS 1.4301 Ø 32 x 1,5 mm
Ausführung: glatt
Oberfläche: pulverbeschichtet

Farbkarte:



weiß
RAL 9010

manhattan
sanitär

anthrazit
RAL 7016

pergamon
sanitär

bahamabeige
sanitär

rubinrot
RAL 3003

dunkelrot
RAL 3007




gelb
RAL 1004

blau
RAL 5002







schwarzgrün
RAL 6012

moosgrün
RAL 6005

Montagebeispiel:

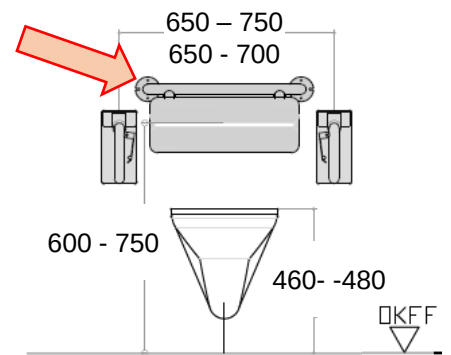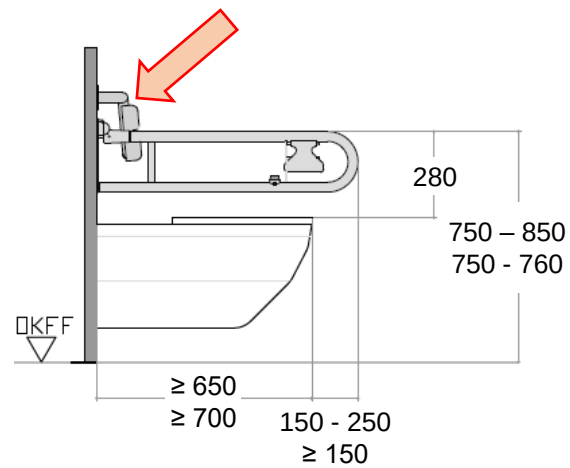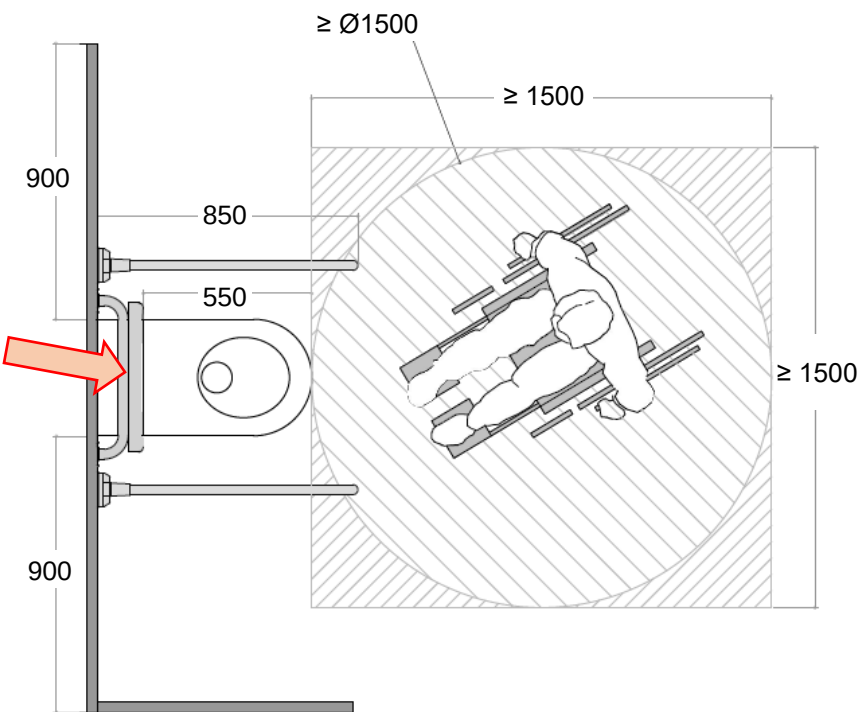

	DIN 8040-1	ÖNORM B 1600
Sitzhöhe des WC-Sitzes	460 – 480 mm	460 – 480 mm
WC – Tiefe von der Beckenvorderkante bis zur rückwertigen Wand	≥ 700 mm	≥ 650 mm
Bewegungsfläche vor dem WC	mind. 1500 x1500 mm	Mind. $\varnothing$ 1500 mm
Klappgriffe	Beidseitig Oberkante Griff 280 mm über Sitzhöhe	Beidseitig OKFF bis Oberkante Griff 750 – 850 mm
Horizontaler Abstand zwischen den Griffen	650 – 750 mm	650 – 750 mm
Fernausslösung	links und rechts	links und rechts
Integrierter Papierrollenhalter	links und rechts	links und rechts
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens	Ab einer Sitztiefe von ≥ 550 mm. 550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens, in einer Höhe von 600 – 750 mm

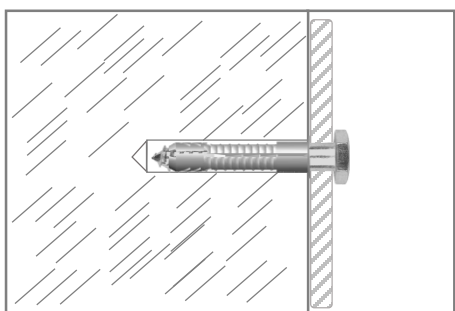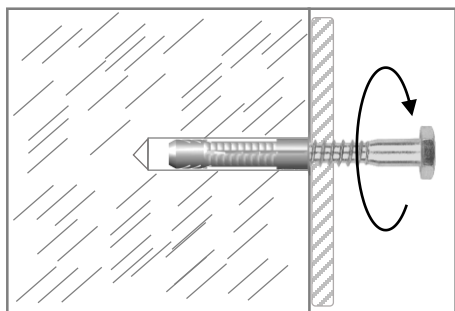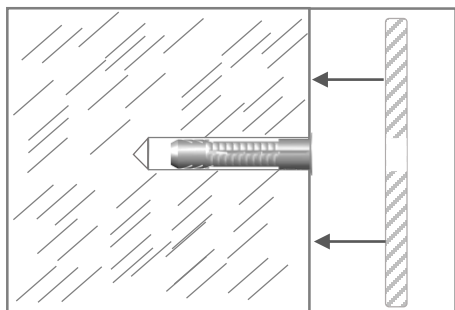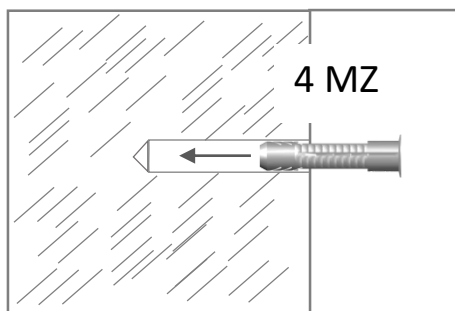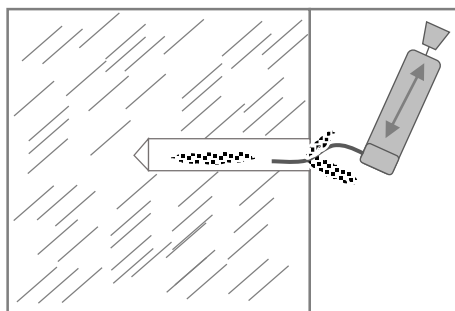
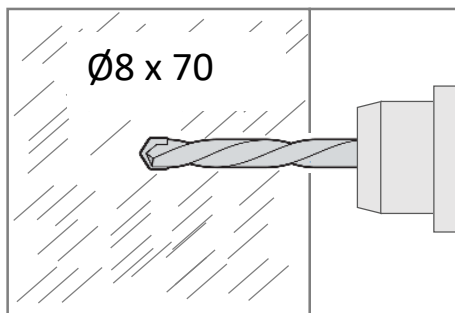


Montagehinweis:


Zur Befestigung der Rückenstützen an massiven Wänden wird das Standard- Befestigungsmaterial mitgeliefert, es besteht aus:
 Mehrzweckdübel 4 MZ 8 x 49 und
 Sechskant-Holzschrauben A2 6 x 70 DIN 571

Geeignet zur Befestigung an folgenden Wandtypen:
Beton B 25, Naturstein (dichtes Gefüge), Vollziegel M 20, Kalksandvollstein KS 12, Vollstein-Leichtbeton V4

Bei Wandtypen die in dieser Erläuterung nicht angeführt sind, muss eine Fachfirma für Befestigungstechnik hinzugezogen werden.

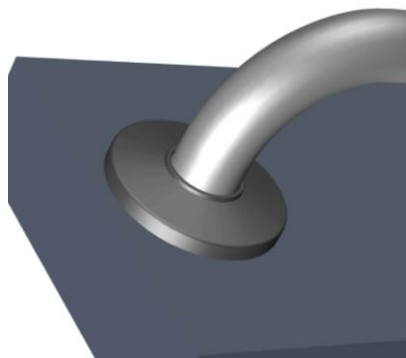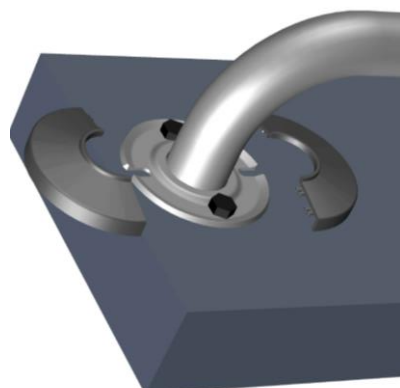




Montagehinweis:
Bohrlochgeometrie:

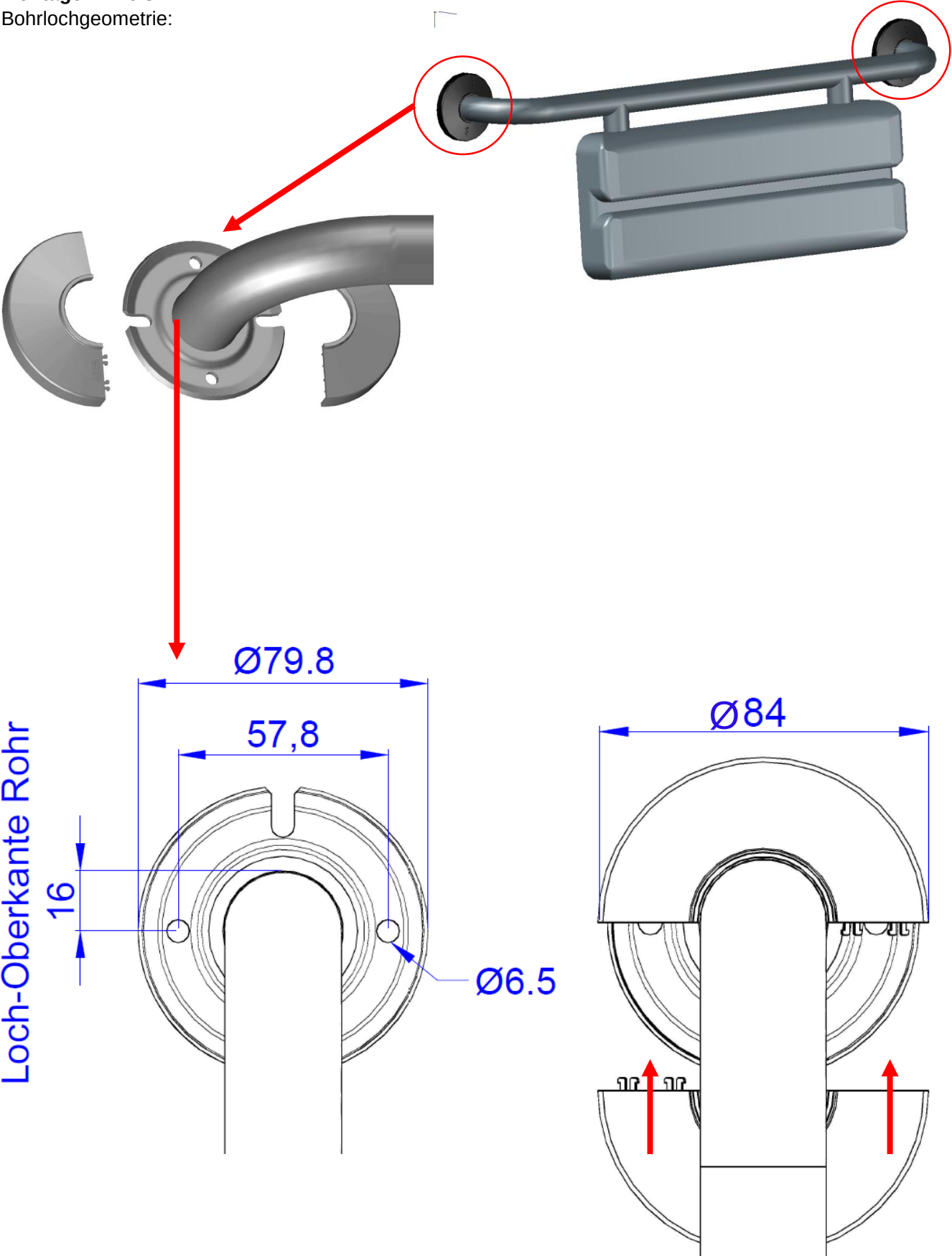

Montagehinweis:

Montage der Rückenstütze A124.0
auf Klappgriff:



Senkkopfschraube
DIN 965 A2 M 8 x 30

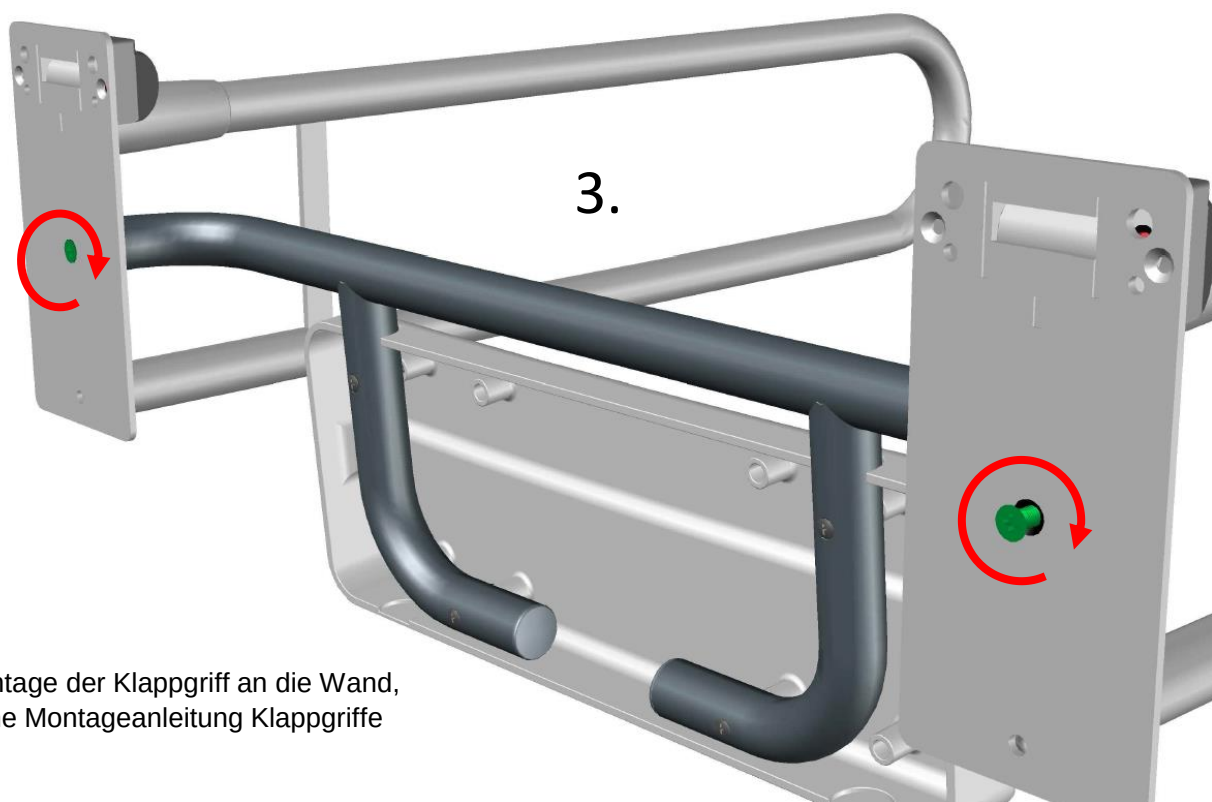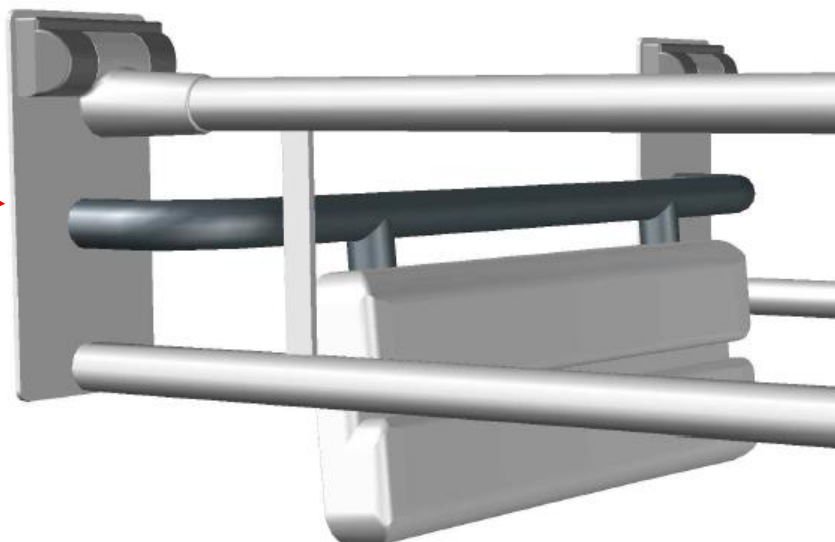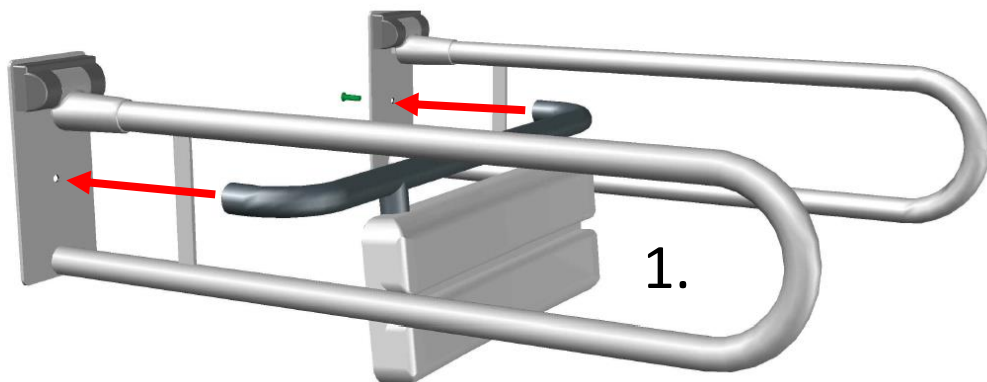


Montage der Klappgriff an die Wand,
siehe Montageanleitung Klappgriffe

Montagehinweis:

Montage der Rückenstütze A124.1 / 2
auf Klappgriff und Wand:

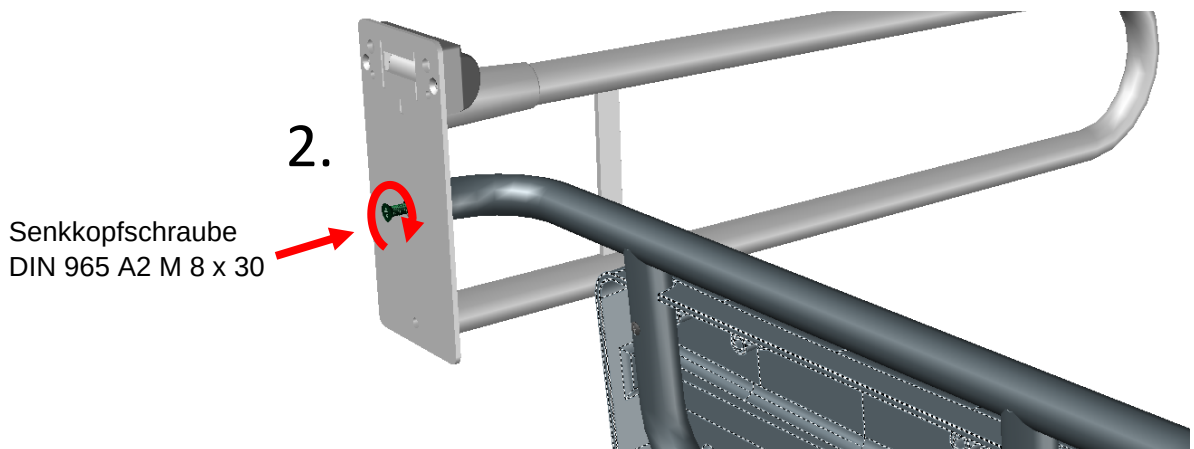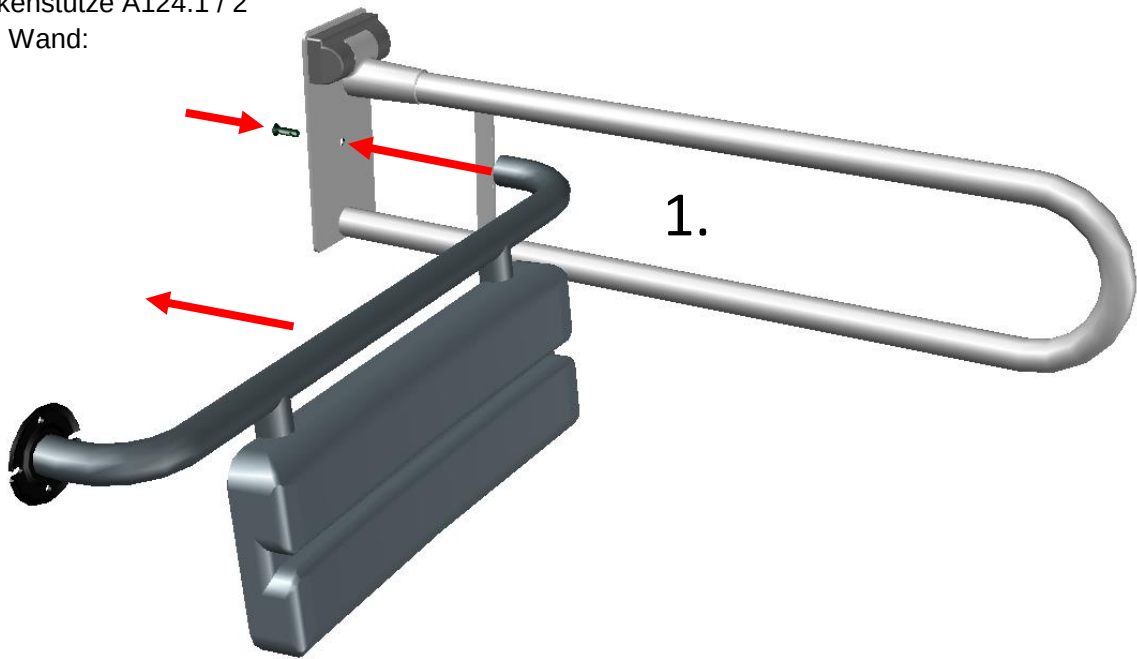


Montage der Klappgriff an die Wand,
siehe Montageanleitung Klappgriffe

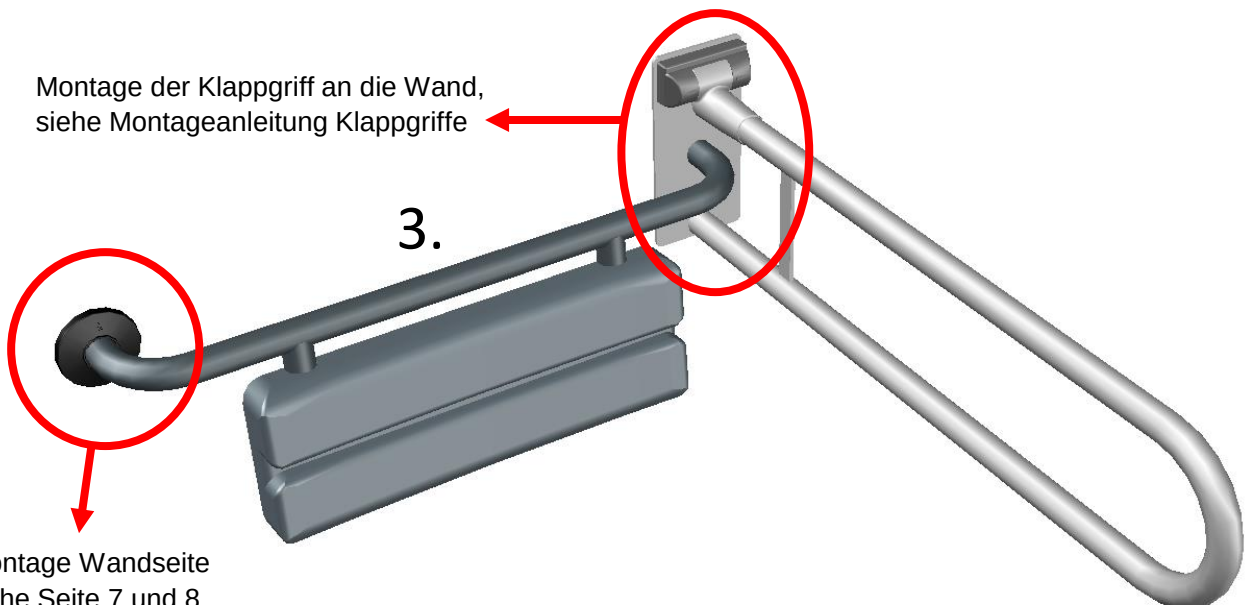


Gesamtdimensionen:


Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Rückenstütze A 123.0:

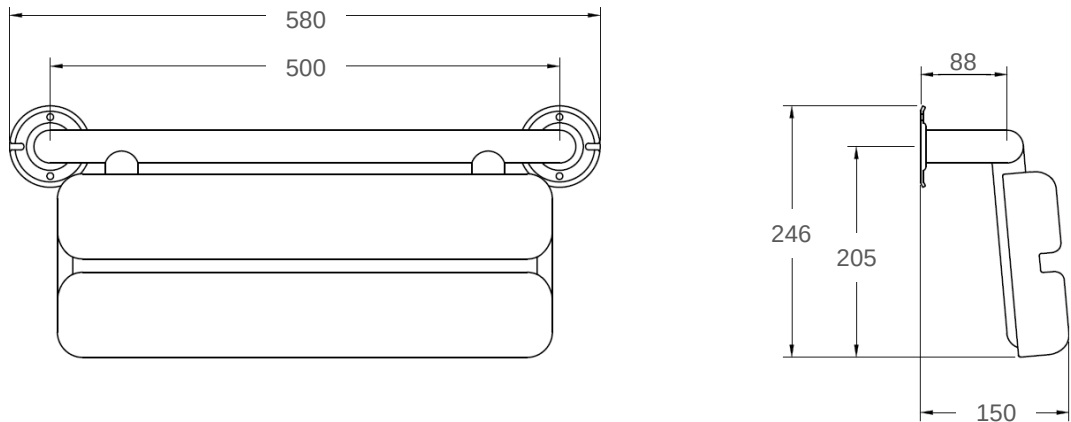


Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Rückenstütze A 126.0:

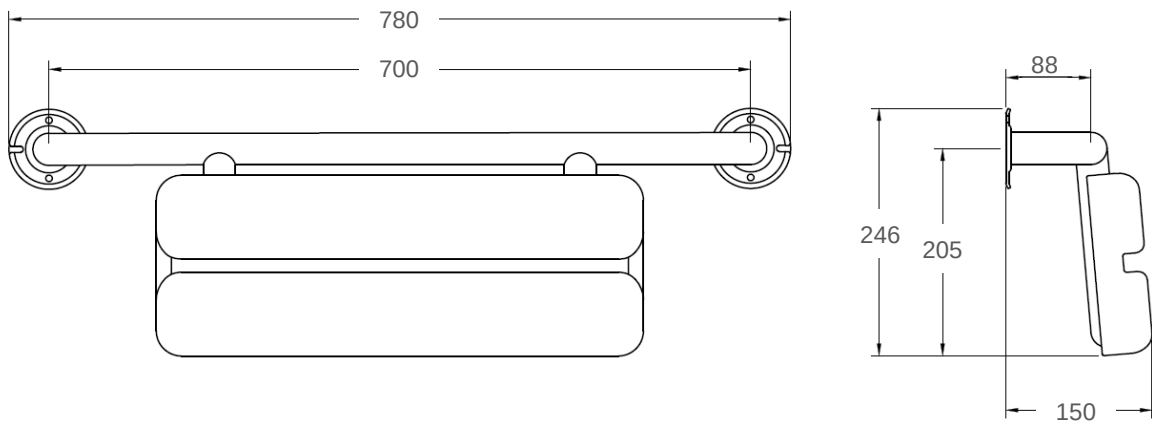


Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Rückenstütze A 125.0:

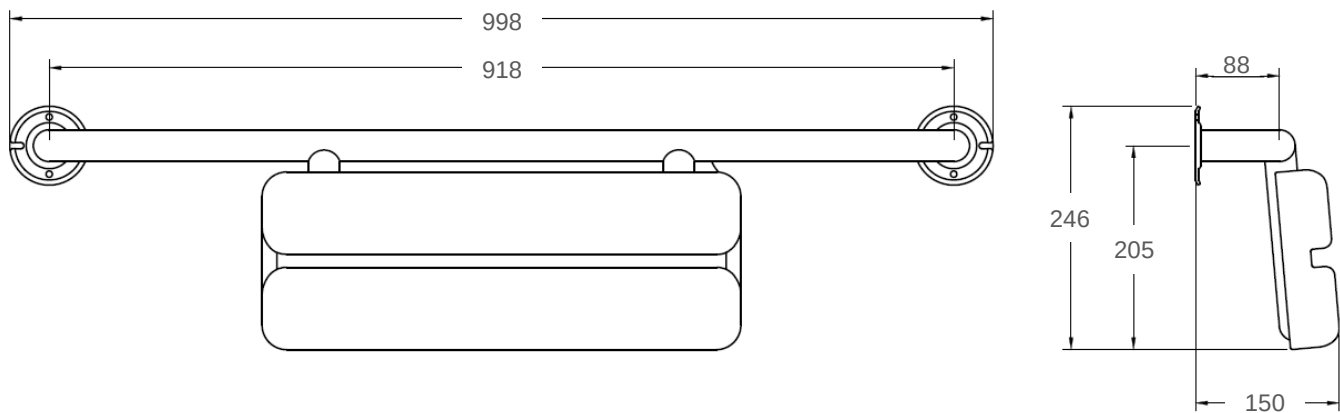


Gesamtdimension Rückenstütze A 124.0:

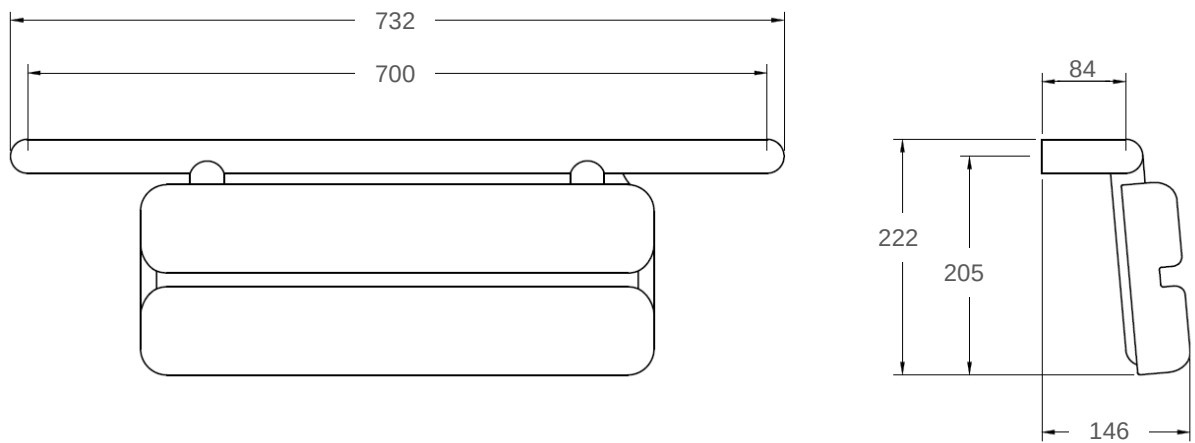

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Rückenstütze A 124.1:

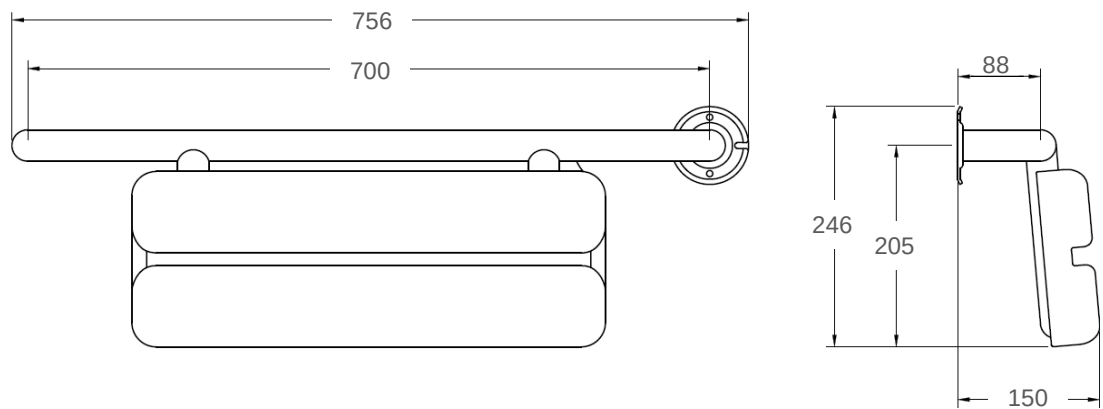

Gesamtdimension ohne Abdeckrosetten Rückenstütze A 124.2:

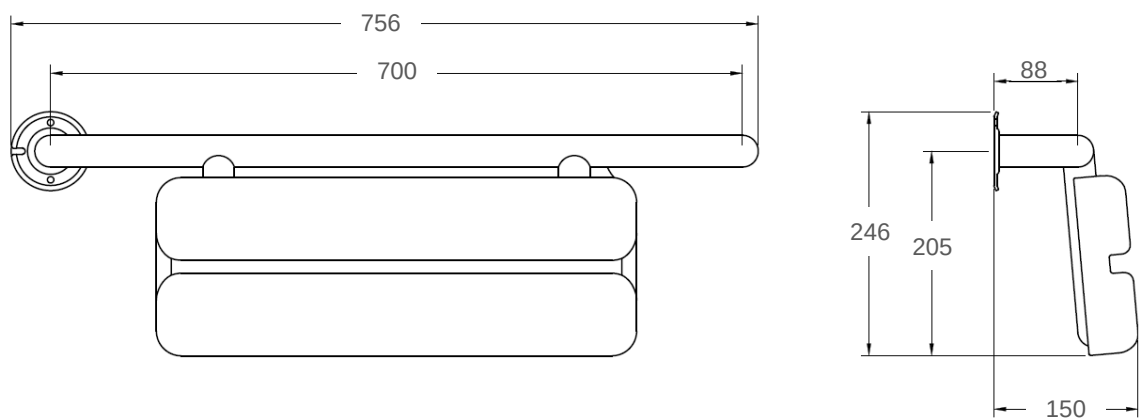

Masse der Rückenstützen:

Typ:	Gewicht:
A 123.0	2,30 kg
A 124.0	2,48 kg
A 124.1	2,49 kg
A 124.2	2,49 kg
A 125.0	2,70 kg
A 126.0	2,50 kg



Diese Montage- und Gebrauchsanleitung muss vom Monteur an den Benutzer weitergegeben und für die Lebensdauer des Produkts aufbewahrt werden.

Pflege- und Betreuungspersonal ist verpflichtet die Benutzer unserer Produkte laut dieser Information zu Unterweisen.

Auf diese und weitere Informationen, können Sie auch auf unserer Homepage www.rehagrip.at zugreifen.



Christian Stögerer e.U.
Gaudenzdorfer Gürtel 73a
1120 Wien

Tel. (+43) 1-810 57 40
Fax (+43) 1-810 57 40 – 28
E-Mail office@rehagrip.at

