

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur

rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Made in Austria

Beschreibung

- Wannenkörper und Außenverkleidung aus glasfaserverstärktem Polyester mit hygienischer Gelcoat-Beschichtung
- Wannensitz mit ergonomisch geformtem Rückenteil, erhöhter Kopfstütze und Ablaufrinne an der Sitzmulde
- stabiler umlaufender Anfahrtschutzgummi
- Türe für einfachen Einstieg, elektrisch zu heben und zu schließen
- Doppellippendichtung für seitliche Türe mit hohem Anpressdruck über die Türverriegelung
- freistehend, ohne Wand- oder Bodenbefestigung
- vier justierbare Füße
- unterfahrbar für mobile Liftersysteme
- Wannenfüllung über Folientastatur gesteuert
- Temperatureinstellung, über Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Verbrühschutzsystem, durch Temperaturschutzbegrenzer
- Patientenbrause, bedienbar über Folientastatur mit Brauseschlauch und Brause mit Selbstschlussventil
- Ab- und Überlaufgarnitur mit Handrad bedienbar
- elektrischer Spindelhubantrieb für Heben- und Senken über Handbedienung
- elektrischer Spindeltrieb für Neigungsverstellung
- Akku für den eventuellen Notbetrieb bei Stromausfall
- genormte Magnetventile, Standardfittings und Armaturen
- Anschlusschläuche Kaltwasser und Warmwasser
- Ablaufschlauch DN 50



Technische Daten

Versorgung:

- Warm- und Kaltwasser, Nippel R 1/2"
- Ablauf- Steckmuffe DN 50
- Elektroanschluss 230 V / 50 Hz, über FI- Schutzschalter und Potentialausgleich

Abmessungen:

- Höhe 1300 mm – 1450 mm,
- Breite 780 mm
- Länge 1830 / 2050 mm
- Einstiegshöhe 475 mm

Gewicht:

- ca. 150 kg

Wasserverbrauch für ein Bad:

- ca. 180 Liter (Vorfüllung Fußbereich: ca. 90 Liter)

Prüfungen:

- ÖVGW, CE-Zeichen

Fabrikat: Krämer

Type: GK RELAX

Art.Nr.: 6.200.00



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Christian Stögerer e.U. ©
Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien
T +43 1 810 57 40, F +43 1 810 57 40-28, E office@rehagrip.at

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur

rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Made in Austria

Zusatzausstattung für GK RELAX

Desinfektionseinrichtung

- Desinfektionsbrause, bedienbar über die Folientastatur, mit rot codiertem Brauseschlauch und Selbstschlussventil
- Die Desinfektionsanlage ist für handelsübliche 5-Liter-Behälter eingerichtet.
- Zuspeisung des Desinfektionsmittels durch Injektor und durchflussregelbares Flowmeter
- Desinfektionsanlage bei gefüllter Wanne aus Sicherheitsgründen gesperrt
- konventionelle Desinfektion oder Zwangsdesinfektion programmierbar

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX D | **Art.Nr.:** 6.200.10

Shampoo- und Badeölspender

- in der Wanne eingebauter Badezusatz- und Shampoospender
- Dosierpumpen über Folientastatur ansteuerbar

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX SHA | **Art.Nr.:** 6.200.20

Hydromassage 2 Düsen

- patentiertes 2-Düsen-System, ohne Rohr- und Schlauchleitungen installiert, selbstentleerend und desinfizierbar, mit zwei Massagedüsen am Fußende des Wannenkörpers ergonomisch integriert
- Strahlrichtung und Intensität der Massagedüsen einstellbar
- Steuerung über die Folientastatur
- Fördermenge bis 1,5 l/s bei einer Druckregelung von 0–3 bar
- automatische Restentleerung der Hydromassage-Düsen nach der Desinfektion

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX H2 | **Art.Nr.:** 6.200.30

Haltegriff

- ein Griff gegenüber der Türe für zusätzlichen Halt

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX HA | **Art.Nr.:** 6.200.40

Beinauflage einsteckbar

- am Wannenrand einsteckbare Auflage zum Hochlagern der Beine

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX BA | **Art.Nr.:** 6.200.70

Systemtrenner 12/12

- Systemtrenner für die Sanitärverrohrung

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX SY | **Art.Nr.:** 6.200.93



rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Christian Stögerer e.U. ©
Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien
T +43 1 810 57 40, F +43 1 810 57 40-28, E office@rehagrip.at

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur

rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Made in Austria

Zusatzausstattung für GK RELAX

Sound & Vision 3 Strahler

(nur bei Wannen ohne Shampoo- und Badeölspender)

• Sound

2 im Wannenkörper rechts und links einlamierte Tonausgänge; Übertragung der Klangwellen an das Wasser mittels der Wanne als Klangkörper

- individuelle Musikauswahl über eingebauten MP3 Player mit USB Anschluss
- Lautstärkeregelung und Titelanwahl über die Folientastatur

• Vision

3 im Wannenkörper integrierte LED Strahler durchfluten das Badewasser in fünf voreingestellten Farben oder leuchten in einem sanften Farbwechsel.

- Bedienung Ein/Aus/Farbwechsel über die Folientastatur

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK HERA SV | **Art.Nr.:** 1.500.60

Anschlusskupplung mit Massageschlauch

(nur in Verbindung mit Hydromassage)

- für Druckstrahlmassage inklusive Massageschlauch und Massagedüse

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX AK | **Art.Nr.:** 1.500.70

Unterwasserbeleuchtung mit Farbwechsler

- eingebaut am Fußende der Wanne
- Bedienung über Folientastatur
- Unterwasserbeleuchtung erst möglich wenn der Füllstand erreicht ist
- automatisches Abschalten der Unterwasserbeleuchtung bei zu geringem Wasserstand

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX UB | **Art.Nr.:** 1.561.01

Drehknopf spezial 42 °C

(nur bei 1/2")

- Temperatureinstellung mit mehr Sicherheit; ohne Spezialwerkzeug nicht über 42 °C drehbar (Wert einstellbar)

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX DS42 | **Art.Nr.:** 4.201.03

Aufpreis Thermostat 3/4"

- Thermostat-Mischer in 3/4"-Ausführung statt 1/2"

Fabrikat: Krämer | **Type:** GK RELAX T3/4 | **Art.Nr.:** 6.216.00




rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at

Christian Stögerer e.U. 
Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien
T +43 1 810 57 40, F +43 1 810 57 40-28, E office@rehagrip.at

Technische Übersicht

Ansicht Seite

Wandanschluss

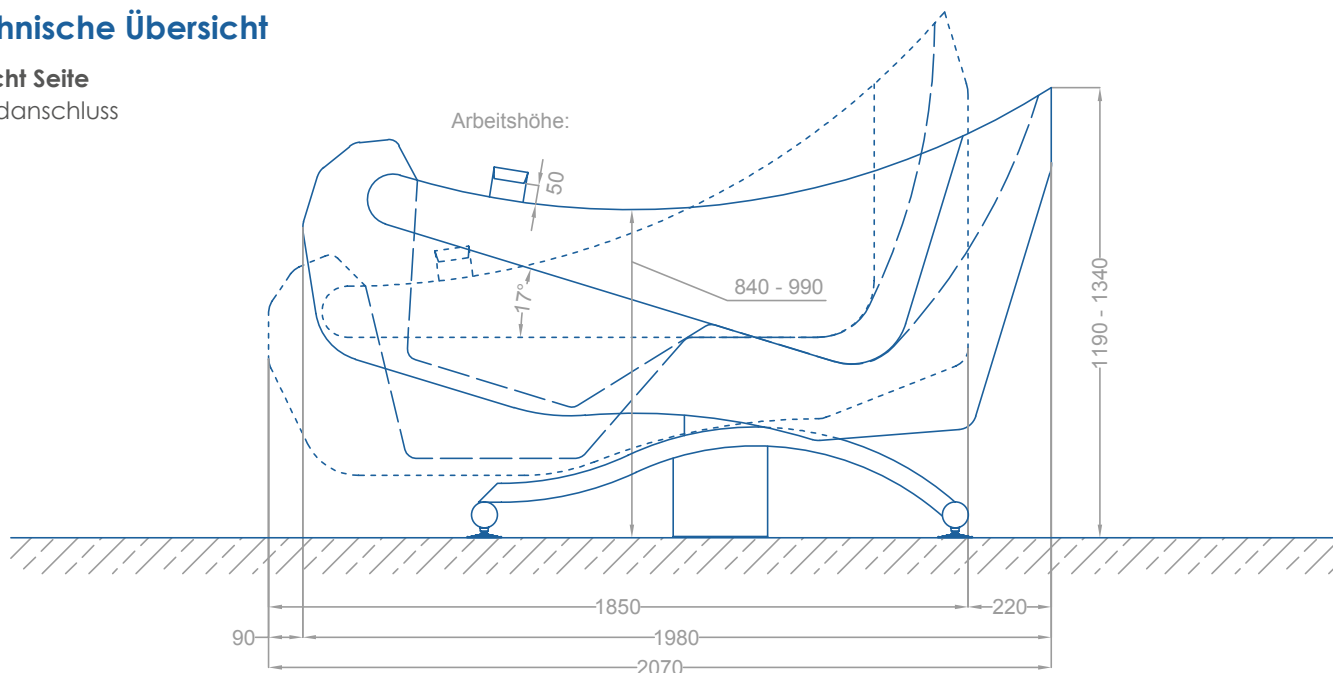

Bauseitige Anforderungen für Sitzbadewanne GK Hera

- KW:** Kaltwasseranschluss, empfohlen 2–5 bar, Absperrventil, Anschlussstück R ½“ mit Aussengewinde, senkrechter Abgang, Schmutzfänger
- WW:** Warmwasseranschluss, empfohlen 2–5 bar, Absperrventil, Anschlussstück R ½“ mit Aussengewinde, senkrechter Abgang, Schmutzfänger
- AW:** Steckmuffe DN 50
- E:** Elektroanschluss 230 V – 50 Hz, spritzwassergeschützte Festanschlussdose 3x 1,5 mm², nach DIN VDE 0100-710, Absicherung 10 A FI-Schutzschalter mit Nenn-Fehlerstrom max 30 mA, Potenzialausgleich

Die Vorschriften des örtl. EVUs sind einzuhalten!

Im Lieferumfang enthalten

- 2 Stk. Nutzwasser-Anschlusschlauch ½“ – 1,5 m
- 1 Stk. Abflussschlauch DN 50 – 1,3 m
- 1 Stk. Elektro-Anschlusskabel – 1,5 m

Aktueller Stand: Mai 2012
Maßstab 1:20, Maße in mm

Sitz-Liege-Wanne GK RELAX

mit elektrischer Höhen/Neigungsverstellung über Folientastatur


rehagrip
Produkte für barrierefreie Bäder
www.rehagrip.at



Made in Austria


Technische Übersicht

Ansicht Seite

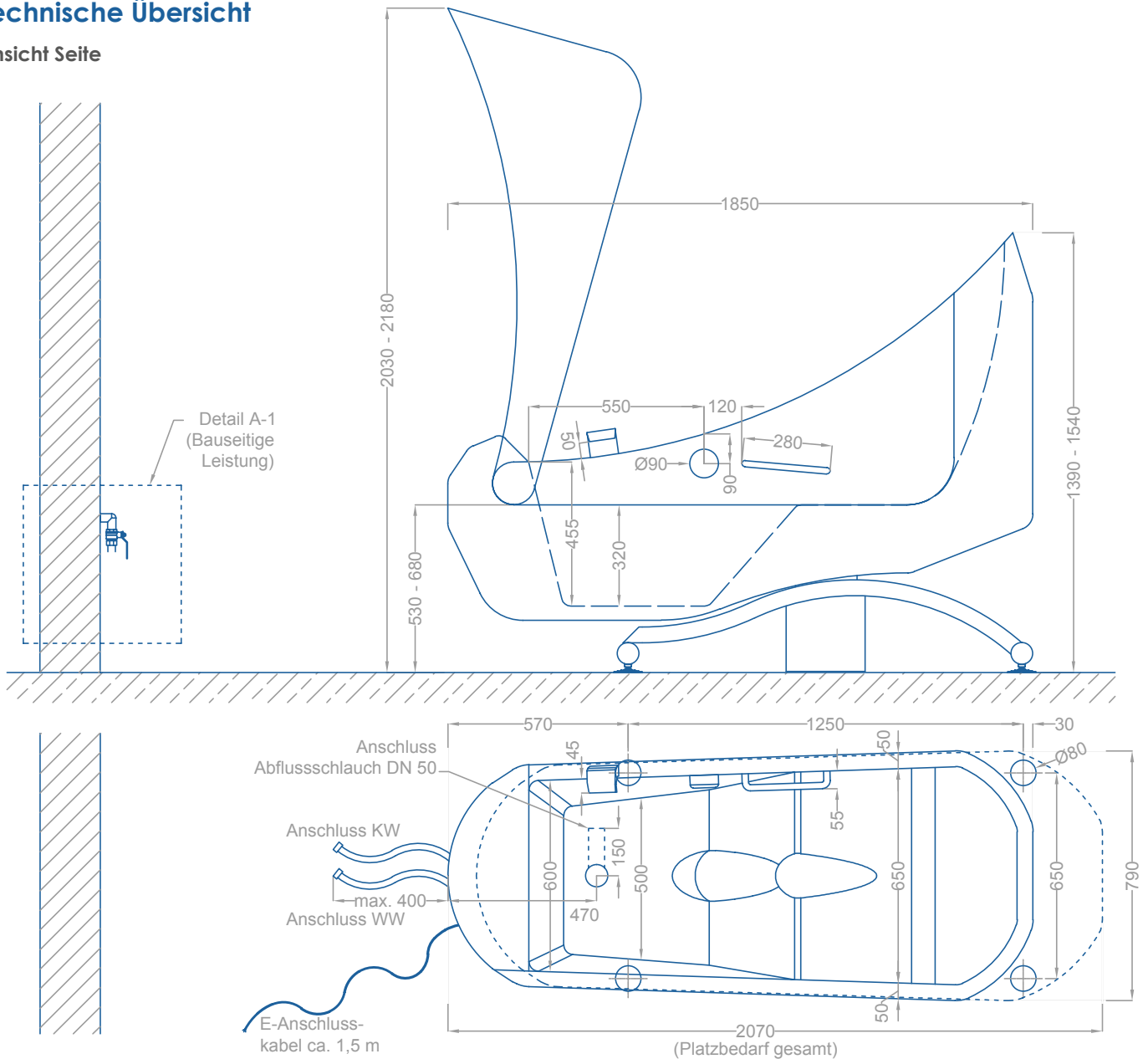

Detail A-1

Skizze

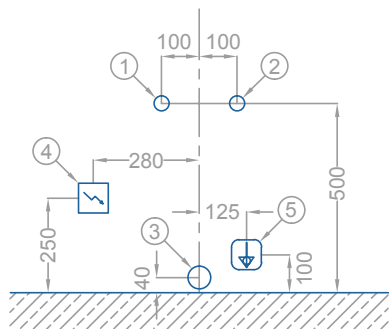

Technische Daten

- Gesamtlänge 2070 mm
- Gesamtgewicht (ohne Wasser) 150 kg
- Maximal erlaubtes Personengewicht 200 kg
- Maximale Füllmenge (ohne Person) 200 l
- Hubleistung 200 kg
- Mindest-Raumhöhe 2500 mm

Bodenbelastung

- Pro Stellfuß 125 kg

- 1 Anschluss Warmwasser 1/2" 3 Steckmuffe DN 50 5 Potenzialausgleich
2 Anschluss Kaltwasser 1/2" 4 E-Anschluss 230 V / 50 Hz

Aktueller Stand: Mai 2012
Maßstab 1:20, Maße in mm



Christian Stögerer e.U. ©
Gaudenzdorfer Gürtel 73a, 1120 Wien
T +43 1 810 57 40, F +43 1 810 57 40-28, E office@rehagrip.at